

# Auriga XL™

Гольмиевый лазер 50 Ватт

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

## Производительность и универсальность




# Auriga XL™

Гольмиевый лазер 50 Ватт

Auriga XL – это высокопроизводительный, универсальный гольмиевый лазер, созданный для использования в многих урологических процедурах. Высокая выходная мощность лазера и сбалансированные параметры подходят как для литотрипсии, так и для лечения ДГПЖ.

## Универсальность

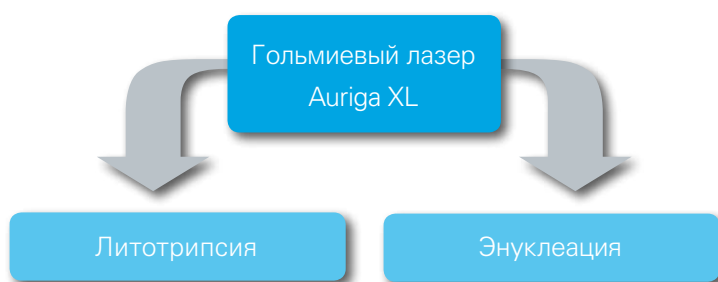

Гольмиевый лазер подходит как для лечения ДГПЖ, так и МКБ

- Литотрипсия:
  - Литотрипсия камней, находящихся в почке, мочеточнике или мочевом пузыре
  - Техника «Stone Dusting»
- ДГПЖ
  - HoLEP
  - Трансуретральная инцизия простаты (TUIP)
  - Инцизия шейки мочевого пузыря (BNI)
- Мочеточниковые и уретральные стриктуры
- Абляция и резекция опухолей мочевого пузыря, мочеточниковых или уретральных стриктур
- Кондиломы




## Мощность

- Высокая выходная мощность – 50 Ватт
- Максимальная частота – 50 Герц
- Максимальная энергия импульса – 4200 миллджоулей
- Высокая выходная мощность импульса для литотрипсии
- Три режима с различными предустановленными параметрами работы:
  - Режим литотрипсии: короткий промежуток между импульсами
  - Режим абляции: средний промежуток между импульсами
  - Режим коагуляции: длительный промежуток между импульсами

## Интеллектуальное распознавание фиброволокна

- Лазер Auriga XL работает с фиброволокнами LightTrail™, включая волокно LightTrail™ 270 μm, способное работать на частоте 18 Герц.
- Консоль распознает тип и размер волокна
- Точное оптическое соединение фиброволокна и консоли позволяет снизить потерю мощности и предотвратить поломку фиброволокна
- Консоль позволяет выбрать только те настройки, которые могут быть предназначены для вставленного фиброволокна

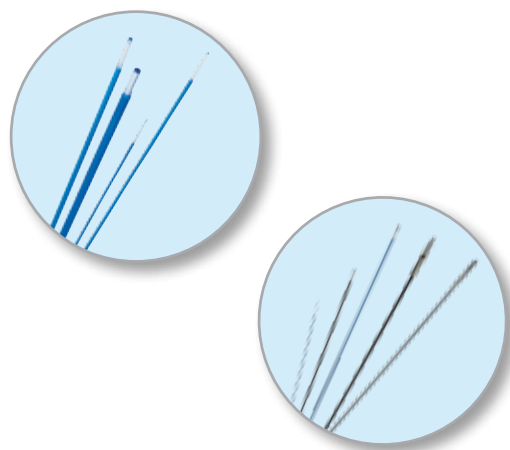


## Функциональный дизайн

- Мобильная консоль, не занимающая много места
- Регулируемая яркость пилотного луча

## Простое в использовании программное обеспечение

- Тачскрин с интуитивно понятным меню
- Изображения на кнопках меню, позволяющие легко ориентироваться

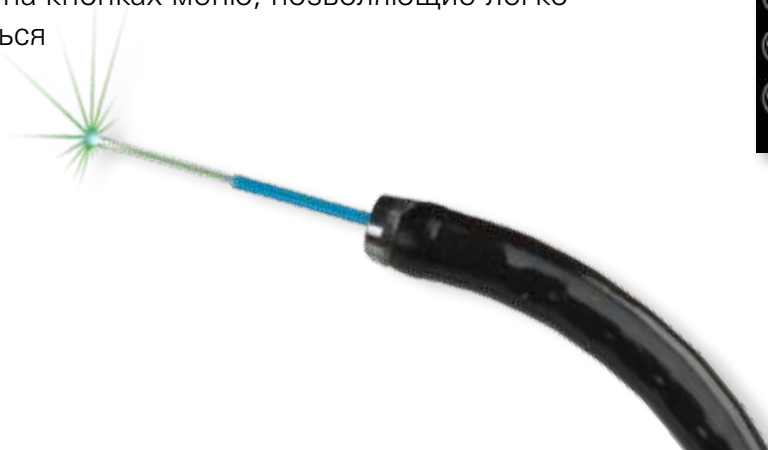

## Гольмиевый специалист – разнообразные сферы применения

Несмотря на то что лазер Auriga XL был создан для урологических процедур, она также используется и в других специальностях, включая гастроэнтерологию, ЛОР, гинекологию, артроскопию, общую хирургию и пульмонологию

Все указанные торговые марки принадлежат соответствующим собственникам.

**ВНИМАНИЕ: закон ограничивает продажу данных устройств врачами или по их заказу.** Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции пользователей указаны на маркировке каждого изделия.

Информация приведена для использования только в странах, где осуществлена регистрация продукции органами здравоохранения.



**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

**Произведено**

StarMedTec GmbH  
Kreuzstraße 22 | 82319 Starnberg  
Германия

**Ordering Information**

+ 49 (0) 8151 / 268 61-0  
info@starmedtec.com  
www.starmedtec.com

© 2015 Boston Scientific Corporation  
или дочерние компании.  
Все права соблюдены  
URO-255601-AB SEP/2015